



**AIGUILLES
D'INSUFFLATION**



VECTEC
DISPOSITIFS
ENDOSCOPIQUES
A USAGE UNIQUE



VECTEC

RIGUILLES DE PNEUMOPERITOINE A USAGE UNIQUE

Référence	Longueur	Diamètre
AIG2 120	120 mm	2,1 mm
AIG2 150	150 mm	2,1 mm

Le corps ergonomique favorise une bonne prise en main et une parfaite maîtrise lors de l'introduction de l'aiguille.

L'extrémité mousse et atraumatique de l'aiguille réduit fortement le risque de perforation des organes intra et retro péritonéaux.

Le témoin de couleur rouge situé dans le corps transparent de l'aiguille, indique visuellement par son déplacement, le passage des différents plans tissulaires de la paroi.

L'affûtage spécifique de l'aiguille assure une perforation parfaite.

L'usage unique garantit une qualité optimale de l'extrémité de l'aiguille et du mécanisme pour chaque intervention.

Un robinet et un raccord luer-lock sont intégrés au corps de l'aiguille.

Produits ne contenant ni PVC, ni latex.


Les aiguilles d'insufflation sont conditionnées dans un sachet pelable et stérilisé à l'ETO selon la norme NF EN ISO 11135-1

Conditionnement : unitaire par boîte de 25.

Fabrication Française

Marquage CE selon la Directive 93/42/CEE

VECTEC certifications :
ISO 9001 (2008)
NF EN ISO 13485 (2004)
ISO 13485 (2003) - CMDCAS

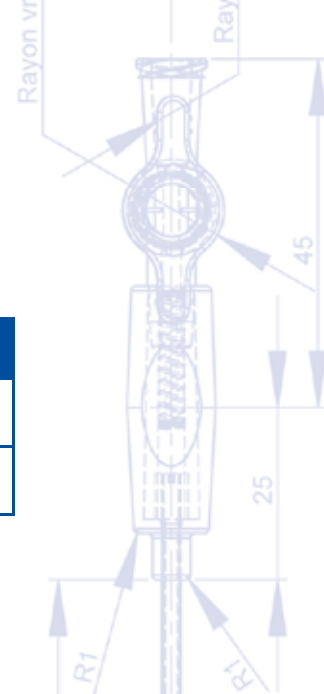

VECTEC

Bioparc - Vichy Hauterive
03270 Hauterive
FRANCE

Tél : +33 (0)4 70 58 41 70
FAX : +33 (0)4 70 58 41 79
Email : vectec@vectec.fr
<http://www.vectec.fr>